




NEOVet

Veteriner
Merkezinizdeki
Teknolojik
Yenilik



US X-RAY
RÖNTGEN A.Ş.

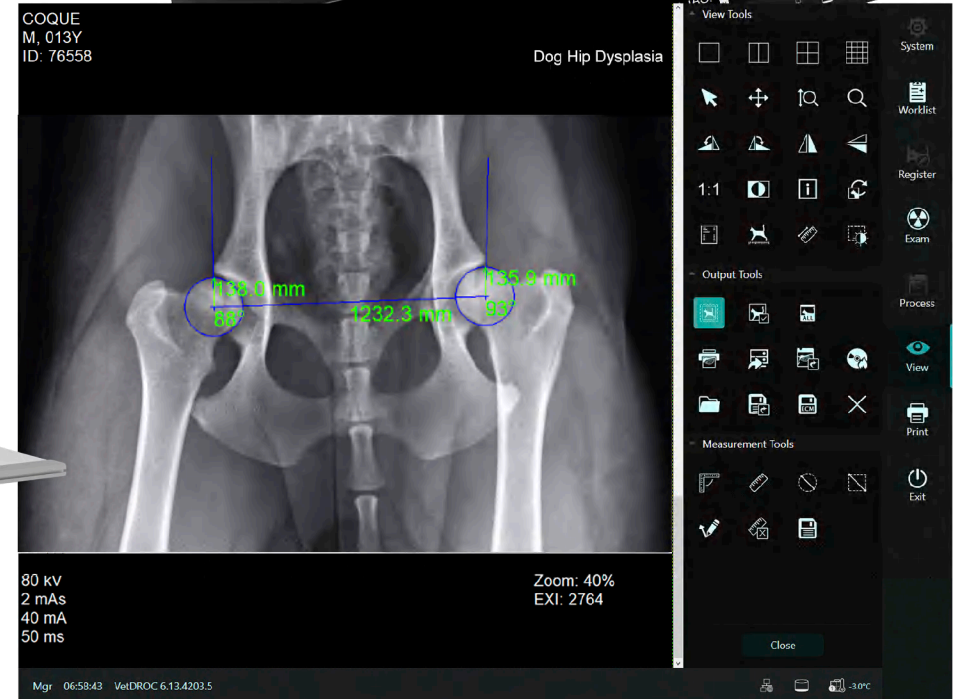


Klinik Akı 1 ÜÇ BASIT DOKUNU

Tek Dokunuş II (ST II): Özel Grafik Anatomik Programı. En basit ve en hızlı işlemi. Optimum görüntüyü elde etmek için yalnızca üç tıklama.

BASITLATMA
Hayvan Seçimi.



ADIM 1
Vücut Bölümü Seçimi.

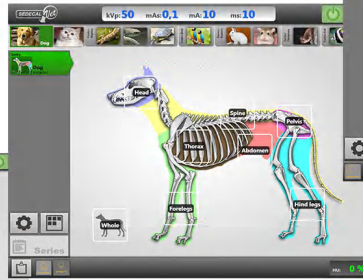

ADIM 2
Görüntü Seçimi.



ADIM 3
Son görüntü önizlemesi



Son görüntü aynı anda Operatör Konsolunda ve Teleskopik Monitöründe de gösterilir.



Veteriner hekimler tarafından ve veterinerler için tıbbi teknolojiyle tasarlanmı Dijital Röntgen Sistemi

Analogdan dijitale kadar çözümler, sabit veya de i ken odak mesafesinde ve açısai projeksiyon imkanında mevcuttur. Neovet tüm veteriner klini i ihtiyaçlarınızı kar ırlar.

NEOVET PREMIUM DR

- Odak Mesafe Aralı ı: 30-120 cm.
- X-Ray I ın Açısai Rotasyonu: +/-90°.
- Sürgülü Tüp Standı(Çok çe itli açısai projeksiyonlara izin verir).




NEOVET VARIABLE DR

- Odak Mesafe Aralı ı: 30-120cm.
- X-Ray I ın Açısai Rotasyonu: +/-90°.

NEOVET FIX DR

- Sabit Odak Mesafesi: 100cm.

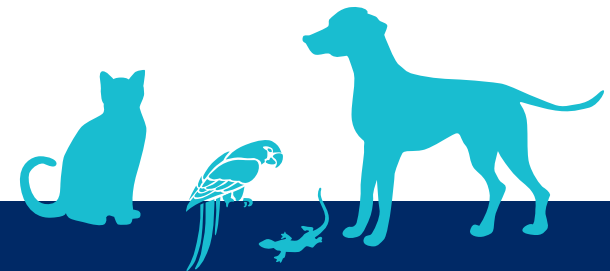

Dedektör duvar deste i, yerde dört ayak üzerinde duran köpe e utlama imkanı sa lar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

X-RAY JENERATÖRÜ ÖZELLİKLERİ		
Sabit Potansiyel kW değerleri	20 kW	32 kW
kVp Aralığı	40 - 125 kVp	40 - 125 kVp
mAs Aralığı	0.1 - 630 mAs (SHFR Jeneratör)	0.1 - 630 mAs (SHFR Jeneratör)
mA Aralığı	10/12.5/16/20/25/32/40/50/64/80/100/125/160/200/250/320	10/12.5/16/20/25/32/40/50/64/80/100/125/160/200/250/320 /400
X-Ray Tüpü	Döner Anot (1.0 / 2.0 mm) / (0.3 / 1.0 mm) X-Ray	Döner Anot (1.0 / 2.0 mm) / (0.3 / 1.0 mm)
jeneratörü	Şebekeye bağlı / Kapasitör Destekli	Şebekeye bağlı / Kapasitör Destekli
Şutlama süresi	0.001-10 sn	0.001-10 sn
MASA		
Masaüstü Tip	4 yönlü yüzergezer masa	
Masaüstü uzunluğu	Standart 150 cm. Opsiyonel: 180 / 200 cm	
Maksimum hasta yükleme ağırlığı	95 Kg	
Frenler	Elektromanyetik	

US X-RAY
RÖNTGEN A.Ş.

D-100 Karayolu Cad.
Yenicepinar Köyü No:40
14240 Merkez-Bolu/TÜRKİYE

NEOVET DR DİJİTAL MODÜL

Yükseltme kiti aracılığıyla Neovet konvansiyonel sistemi dijital sisteme dönüştürür.




PC İŞ İSTASYONU

- Yüksek Performanslı Video Grafik Kart.
- 2 x Hard disk: 1 TByte RAID 1 konfigürasyon.
- İşlemci: Intel i5.
- RAM Hafızası: 8Gbytes



TEŞHİS MONİTÖRÜ

- Panoramik 24" TFT Renkli Ekran
- DICOM Önaray Standardı.
- 2 MPx ekran matrisi (1920 x 1080).

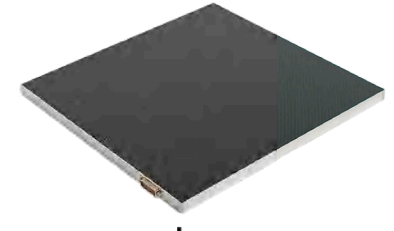

DİREKT DİJİTAL DEDEKTÖR

- Cesium Iodide Sintilatör.
- Dedektör Teknolojisi: Amorphous Silicon.
- Aktif Görüntüleme Alanı 35x43/43x43 cm.
- Pixel Boyutu: 100 µ / 139 µ.



GÖRÜNTÜLEME YAZILIMI

- Veterinerlik Alanında Spesifik Ölçüm Araçları: TPLO, TTA, VHS, Norber Açısı.
- DICOM Görüntüleyiciler

CAT_002_VET_21_EN_NEOVET

