



# Tařınabilir sistem SPL - VET - HF

**Piyasanın en güçlüsü**



## SPL - Vet 5.0 / 8.0

Taşıyabilir Röntgen Ünitesi SPL-VET, 5 kW ve 8 kW olmak üzere iki modeliyle piyasadaki en güçlü ünedir. Bu durum, kedi ve köpek gibi küçük hayvanlarda maruz kalma süresinin azaltılması ve hareketlerin etkisi açısından önemli bir avantajdır. Manevra kabiliyeti ve kompakt boyutları sayesinde bu ekipmanı klinik dışındaki uygulamalar için ideal kılar. Ayrıca sistem, biri çok ince olan ve küçük anatomik parçaların yüksek çözünürlükte röntgeninin çekilmesine olanak tanıyan iki fokus noktası içerir. SPL-VET piyasadaki iki fokus noktasına sahip tek sistemdir.

### Hızlı ve kolay iş akışı için sezgisel kontrol paneli


Hayvan anatomisinin her vücut bölümünün benzersiz özelliklerine göre "kullanıcı tarafından ayarlanabilen"

20 önceden ayarlanmış radyografik teknik içeren yerleşik Anatomik Programlanmış Radyografi (APR) sayesinde şutlama parametrelerine kolay erişim. mAs ve kVp ekranı, Minimal Veteriner masasının kolunu veya elde ters tutuş pozisyonundaki X-Ray ünitesinin yönüne bağlı olarak ekranı döndüren bir düğme ile donatılmıştır.

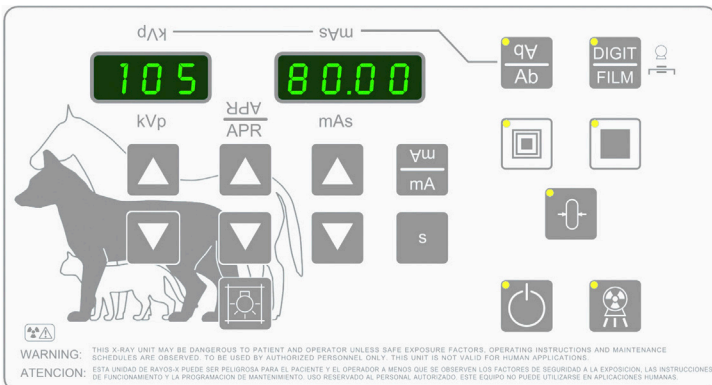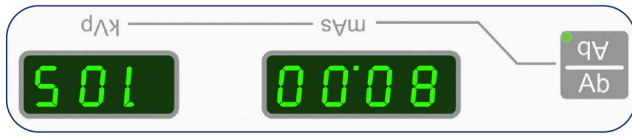

### Yeni şutlama butonu – kolaylaştırılmış kullanım

Kolimatör etkinleştirme düğmeli yeni manuel şutlama butonu, kolimatör LED ışığının ve şutlamanın tek elle etkinleştirilmesine olanak tanır.

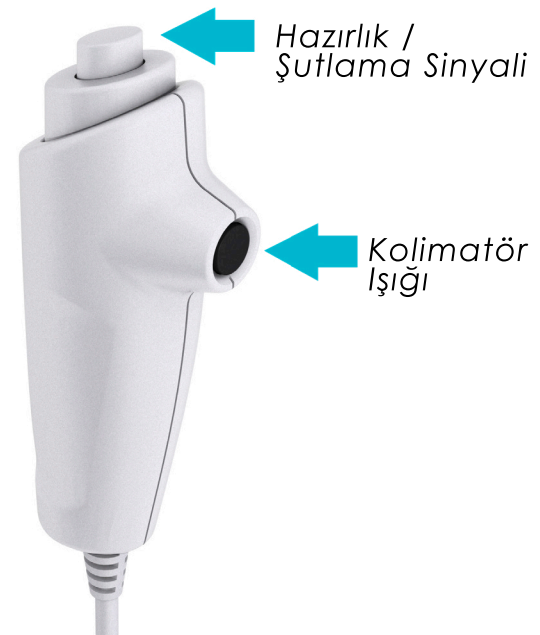



## Taşıma çantası

SPL-Vet ünitesi ihtiyaç halinde hem klinikte hem de sahada yapılacak muayeneler için güvenli bir şekilde taşınabilir.



## KATLANABİLİR Stand SUP-R/F opsiyonu

Tamamen katlandıktan sonra küçük boyutlu opsiyonel hafif, katlanabilir stand, çok çeşitli farklı X-Ray projeksiyonlarında kullanılmayı kolaylaştırır.



# Özellikler





# Güç Çıkışı

X-RAY JENERATORÜ		
Sabit çıkış gücü	8 kW	5 kW
Invertör frekansı	300 kHz	300 kHz
Anot Gerilimi	40-125 kVp	40-125 kVp
Çıkış Akımı	5-100 mA	5-100 mA
Şutlama süresi	0.001 - 10 sn	0.001 - 10 sn
mAs aralığı	0.1 - 250 mAs	0.1 - 250 mAs
Foküs	0.6/2.8 mm	0.5/1.8 mm
Şebeke Gerilimi	Tek Faz 220 – 240 VAC, 50/60Hz 30 A (eğri tipi C) or 16 A (eğri tipi D)	Tek Faz, 220 – 240 VAC, 50/60Hz 16 A (eğri tipi C) or 10 A (eğri tipi D)

GÜÇ ÇIKIŞI	
SPL - VET 8.0	SPL-VET 5.0
121 - 125 kVp @ 40 mA	121 - 125 kVp @ 25 mA
111 - 120 kVp @ 50 mA	111 - 120 kVp @ 32 mA
101 - 110 kVp @ 64 mA	101 - 110 kVp @ 40 mA
100 kVp @ 80 mA	100 kVp @ 50 mA
80 kVp @ 100 mA	60 kVp @ 80mA
	50 kVp @ 100 mA

XR Seyyar Ünite  
Ağırlık: 15Kg  
Boyutlar (UxGxY): 46x29x19 cm

Katlanabilir Stand  
Ağırlık: 23.5Kg  
Boyutlar (UxGxY): 88x103x244 cm

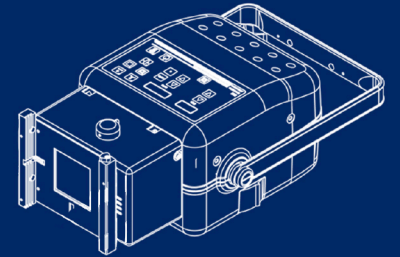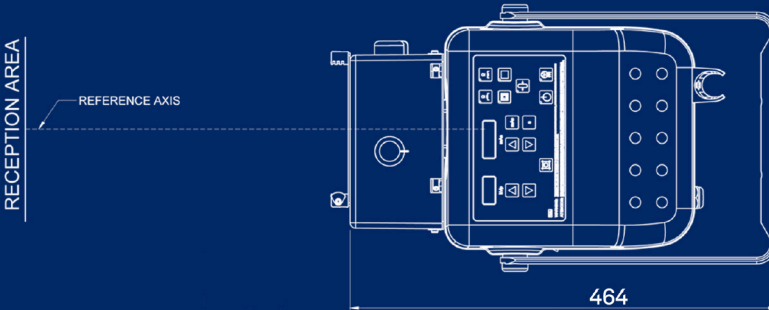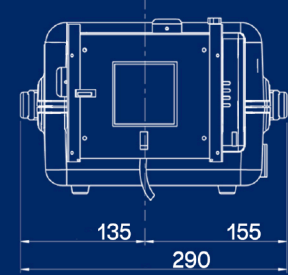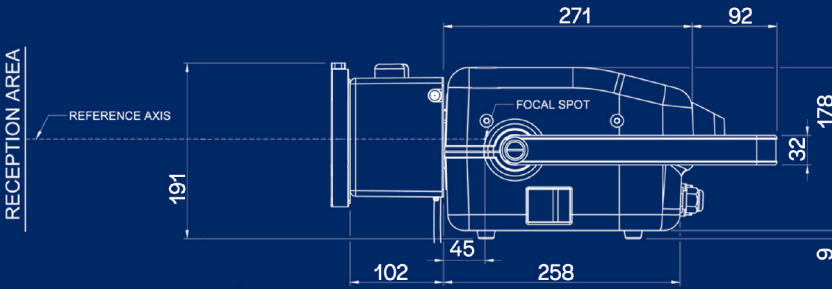

Boyutlar :mm  
Tolerans ± 1%



CAT\_002\_VET\_21\_EN\_SPL

**US X-RAY**  
RÖNTGEN A.Ş.

D-100 Karayolu Cad.  
Yenicepınar Köyü No:40  
14240 Merkez-Bolu/TÜRKİYE



sale@usx-ray.com



+90 374 243 92 00